

SOFT

Misuratore di pressione da polso



SOFT INFLATE TECHNOLOGY:
Massimo comfort con la massima precisione



Media delle ultime
3 misurazioni



Indicatore di aritmie
irregolari



Classificazione del livello
di ipertensione



5 anni di garanzia

Il nuovo misuratore da polso Medel **SOFT** è dotato di un innovativo metodo di misurazione in grado di misurare i valori pressori in fase di gonfiaggio per misurazioni più confortevoli e accurate. La scala numerica permette di identificare i valori misurati indicando una possibile ipertensione (posizionamento sul livello 1-3). Medel SOFT è dotato di grande schermo per una lettura più chiara dei valori, con indicatore di eventuali aritmie rilevate durante la misurazione. Medel SOFT è dotato anche di un sensore di movimento che rileva qualsiasi movimento che può invalidare il risultato e avvisa l'utente tramite indicazione sul display. È inoltre possibile visualizzare la media delle ultime 3 misurazioni effettuate, per un controllo più puntuale della propria pressione arteriosa. Garanzia di 5 anni. Dispositivo Medico Classe IIa.



Sensore di movimento



Per polso con
circonferenza 13.5-21.5




Indicatore batteria scarica



60 posizioni di memoria



Batterie incluse

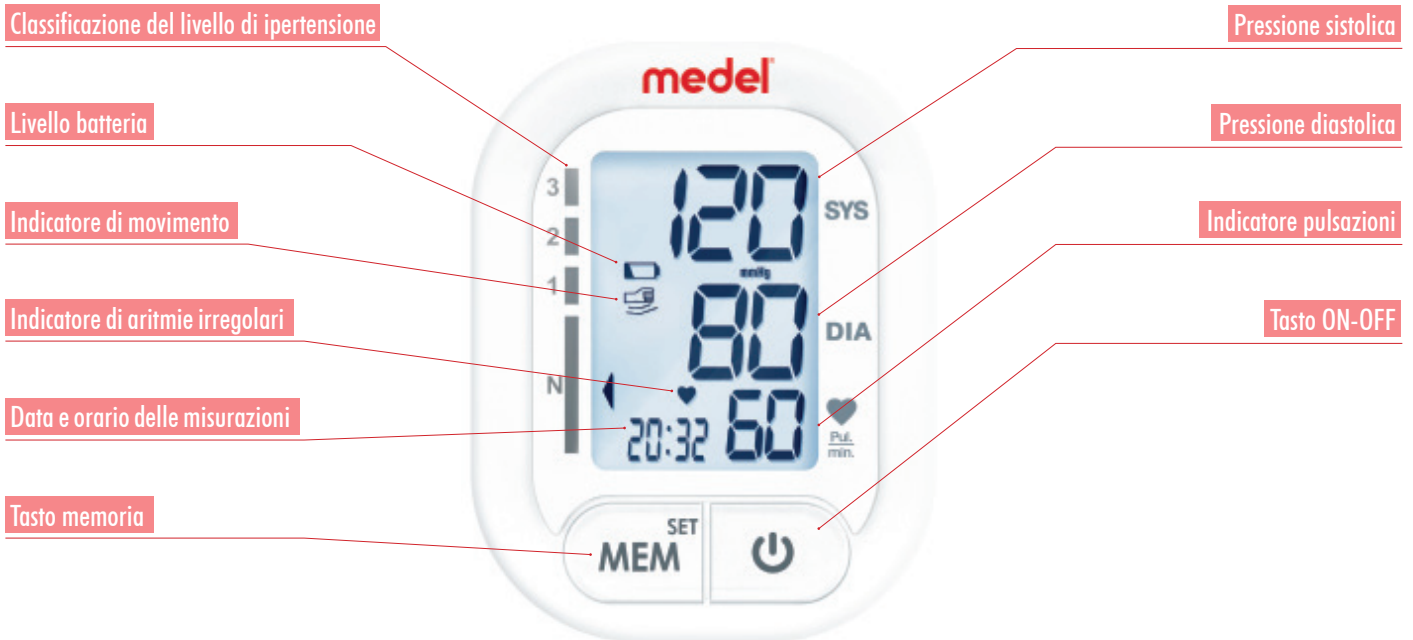

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|---|
| Metodo misurazione | Oscillometrico |
| Precisione misura | pressione + / - 3 mmHg battiti + / - 5% |
| Range di misurazione | SIST: da 60mmHg a 230 mm Hg DIAST: da 40mmHg a 130mmHg PULS: 40-199 battiti/min |
| Alimentazione batterie | 2 batterie alcaline AAA |
| Memoria misurazioni | 60 |
| Numero utenti | 1 |
| Tripla Visualizzazione (Sist/Diast/Puls) | ✓ |
| Indicatore data/ora | ✓ |
| Sensore di movimento | ✓ |
| Dimensioni LCD (bxh) | 3,2 cm x 4,5 cm |
| Tipo bracciale | da polso |
| Bracciale STD in dotazione | Standard, da 13,5 a 21,5 cm |



ACCESSORI

- Contenitore rigido per la custodia ed il trasporto

